

Manuale di installazione veloce

1 Configurazione minima

Il dispositivo si collega a un computer con almeno le seguenti caratteristiche:

- Windows 10 o 11, o MacOS Monterey (versione 12) o successivo
- Intel i3 per le versioni Windows
- Chip Intel i5 o M1 per le versioni MacOS
- 8 GB DI RAM
- Risoluzione consigliata: almeno 1600*900
- Per utilizzare un accessorio Bluetooth (BioMoov, BlueBack, Emy o Perifit), è necessario un PC con **Windows 10 o 11** dotato di una scheda BlueTooth, oppure MacOS

Si noti che il software Biostim non funziona con i file :

- Windows 10S o 11S
- PC con chip ARM
- Tablet o smartphone (Android o iOS)
- Chromebook

2 Software richiesto

Sul computer deve essere installato il seguente software:


- Driver FTDI (installazione tramite CDM212xxx_Setup.exe fornito con il software)
- Foxit PDF Reader

Se non sono già presenti sul computer, i file di installazione sono disponibili sulla chiave nella directory "drivers".

3 Installazione

3.1 Finestre

Installare il programma sul desktop facendo doppio clic sull'utilità di **installazione** (o **installation.cmd**) alla radice della chiave.

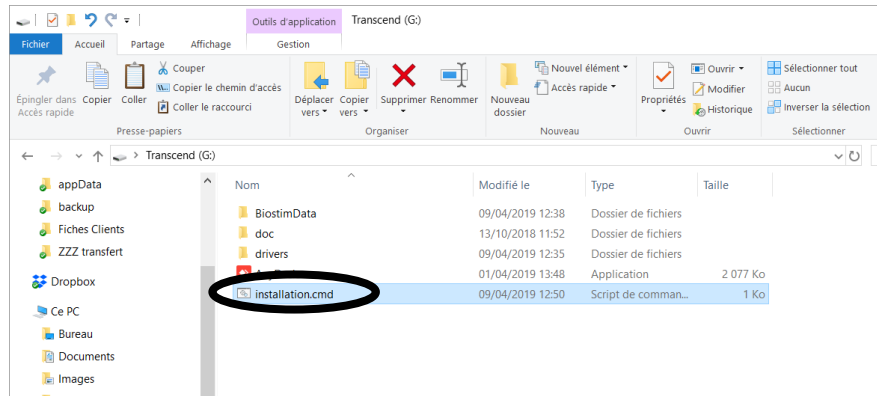

Questa operazione crea una directory BiostimData nella directory utente (che conterrà tutti i dati del paziente) e un collegamento sul desktop.

3.2 Mac OS

Eseguire il programma Biostim_Installer.pkg.

Questa operazione crea una directory BiostimData nella directory utente (che conterrà tutti i dati del paziente) e un collegamento sul desktop.

4 Inizio

Portare l'interruttore di accensione/spengimento sul retro dell'apparecchio su ON "1".
Verificare che la spia verde di alimentazione sulla parte anteriore dell'apparecchio sia accesa.

Eseguire il programma Biostim sul computer



5 Verifica della connessione

Controllare che la connessione sia stabilita: tasto verde Home.



Il pulsante Home **rosso** indica un problema di comunicazione tra il computer e il dispositivo. In questo caso, verificare i seguenti punti:


- Il modulo è alimentato e il LED verde sul pannello frontale è acceso.
- Il cavo USB è collegato correttamente al dispositivo e al computer.
- Il driver FTDI è installato correttamente (CDM212xxx_Setup.exe).

Il pulsante Home **arancione** indica un problema con la lampadina dell'arresto di emergenza:


- Controllare che la lampadina dell'arresto di emergenza sia collegata
- Se è stato attivato l'arresto di emergenza, il BioStim deve essere riavviato (interruttore on/off sul retro del dispositivo).

6 In caso di problemi

Andare alla scheda Autotest. Se viene rilevato un problema, questo viene indicato in rosso. Se non c'è connessione a Internet, il logo dell'autotest sarà rosso.

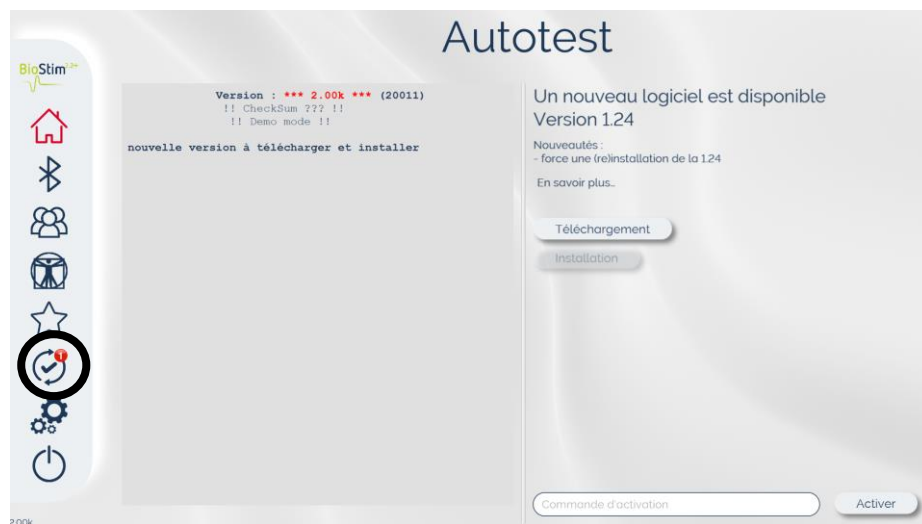

Se ciò non bastasse, è possibile accedere alla scheda Contatti della pagina di configurazione, dove è possibile segnalare problemi o formulare suggerimenti via e-mail.

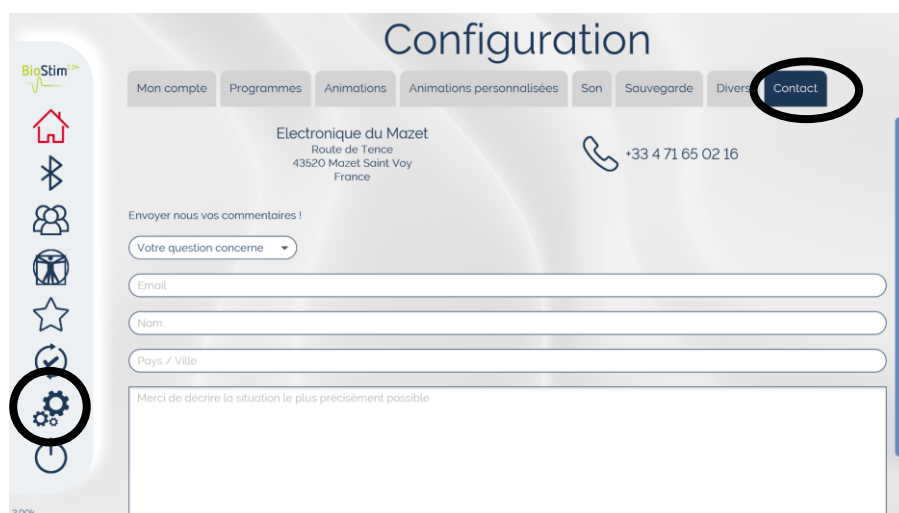

7 Telecomando

Durante l'installazione, il software AnyDesk è stato installato sul PC. Esso consente il controllo remoto del PC per gestire un servizio di assistenza post-vendita.

Sul è disponibile un collegamento



Per autorizzare un tecnico a prendere il controllo, è necessario fornirgli il nome utente e la password che appaiono nella finestra dopo l'avvio del software.

