

QuickStart

1 Minimale Konfiguration

Das Gerät wird an einen Computer angeschlossen, der mindestens die folgenden Merkmale aufweist:

- Windows 8, 10 oder 11, oder MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB RAM
- Empfohlene Auflösung: mindestens 1366*768
- Um ein Bluetooth-Zubehör (Blueback, BioMoov, Emy oder Perifit) zu verwenden, benötigen Sie einen PC mit **Windows 10 oder 11**, der mit einer Bluetooth-Karte ausgestattet ist, oder MacOS

2 Anforderungen an die Software


Die folgende Software muss auf Ihrem Computer installiert sein:

- Java 8 64-Bit-Version (<https://www.java.com/fr/download/>)
- FTDI-Treiber (Installation über CDM212xxx_Setup.exe im Lieferumfang der Software)
- Foxit PDF-Reader

Wenn sie nicht bereits auf dem Computer vorhanden sind, befinden sich die Installationsdateien auf dem Schlüssel im Verzeichnis "drivers".

3 Einrichtung

Installieren Sie das Programm auf dem Desktop durch Doppelklick auf das Installationsprogramm (oder **installation.cmd**) im Stammverzeichnis des Schlüssels.

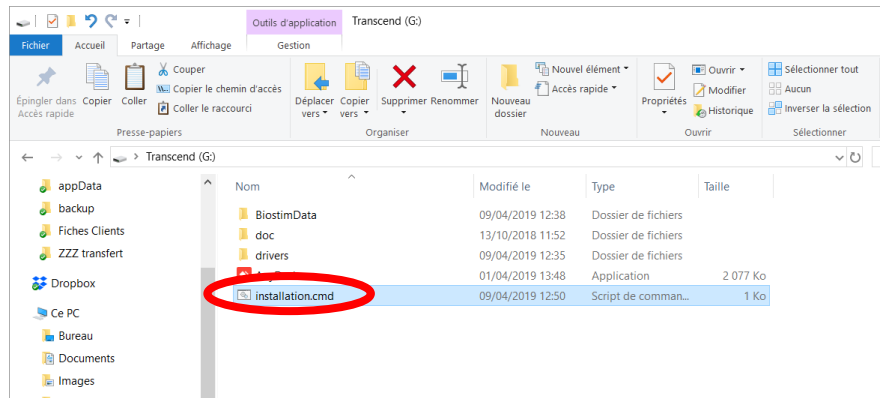

Bei diesem Vorgang wird im Benutzerverzeichnis ein Ordner "BiostimData" (der alle Patientendaten enthält) sowie eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt.

Das Installationsverfahren für einen Mac ist spezifisch. Sie ist auf der Website mazetsante.fr auf der Support-Seite zu finden.

4 Start

Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf der Rückseite des Geräts auf ON "1".
Vergewissern Sie sich, dass die grüne Netzkontrollleuchte an der Vorderseite des Geräts leuchtet.

Führen Sie das Biostim-Programm auf dem PC  aus.

5 Überprüfung der Verbindung

Prüfen Sie, ob die Verbindung hergestellt ist: grüne Home-Taste.

Die **rote** Home-Taste weist auf ein Kommunikationsproblem zwischen dem PC und dem Gerät hin. Überprüfen Sie in diesem Fall die folgenden Punkte:

- Das Modul ist eingeschaltet, und die grüne LED auf der Vorderseite leuchtet.
- Das USB-Kabel ist ordnungsgemäß mit dem Gerät und dem PC verbunden.
- FTDI-Treiber korrekt installiert (CDM212xxx_Setup.exe)




Die **orangefarbene** Home-Taste weist auf ein Problem mit der Not-Aus-Lampe hin:


- Prüfen Sie, ob die Not-Aus-Lampe angeschlossen ist.
- Wenn der Notausschalter aktiviert wurde, muss das Biostim neu gestartet werden (Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts).

6 Im Falle eines Problems

Gehen Sie auf der Konfigurationsseite auf die Registerkarte Support und befolgen Sie die rot markierten Hinweise.

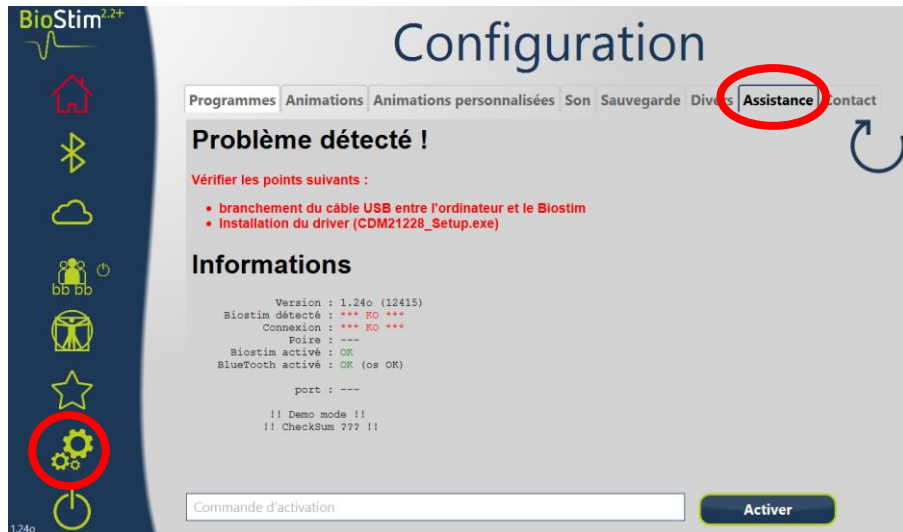

Wenn Ihnen das nicht reicht, können Sie auf der Registerkarte Kontakt Probleme melden oder Vorschläge per E-Mail machen.

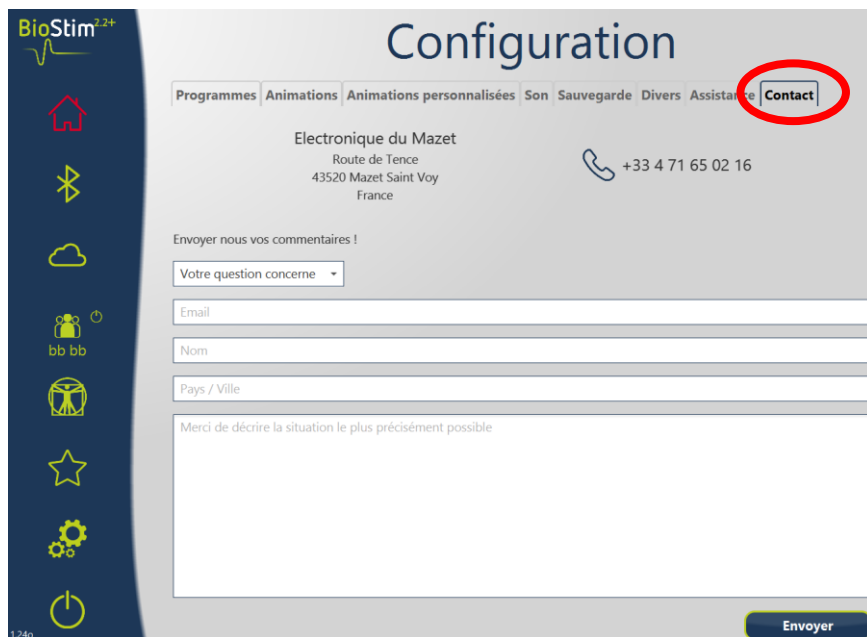

7 Fernsteuerung

Während der Installation wurde die AnyDesk-Software auf dem PC installiert. Sie ermöglicht es Ihnen, den PC fernzusteuern, um einen Kundendienst zu verwalten.

Eine Verknüpfung ist auf dem Desktop verfügbar



Um einen Techniker zu autorisieren, die Kontrolle zu übernehmen, müssen Sie ihm das Login und das Passwort geben, die nach dem Starten der Software im Fenster erscheinen.

