

Inicio rápido

1 Configuración mínima

El dispositivo se conecta a un ordenador con al menos las siguientes características:

- Windows 8, 10 u 11, o MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB RAM
- Resolución recomendada: al menos 1366*768
- Para utilizar un accesorio Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy o Perifit), necesita un PC con **Windows 10 u 11** equipado con una tarjeta BlueTooth, o MacOS

2 Requisitos de software


El siguiente software debe estar instalado en su ordenador:

- Java 8 versión de 64 bits (<https://www.java.com/fr/download/>)
- Controlador FTDI (instalación mediante CDM212xxx_Setup.exe suministrado con el software)
- Lector Foxit PDF

Si aún no están presentes en el ordenador, los archivos de instalación están disponibles en la llave, en el directorio "drivers".

3 Instalación

Instale el programa en el escritorio haciendo doble clic en la utilidad de **instalación** (o **installation.cmd**) en la raíz de la llave.

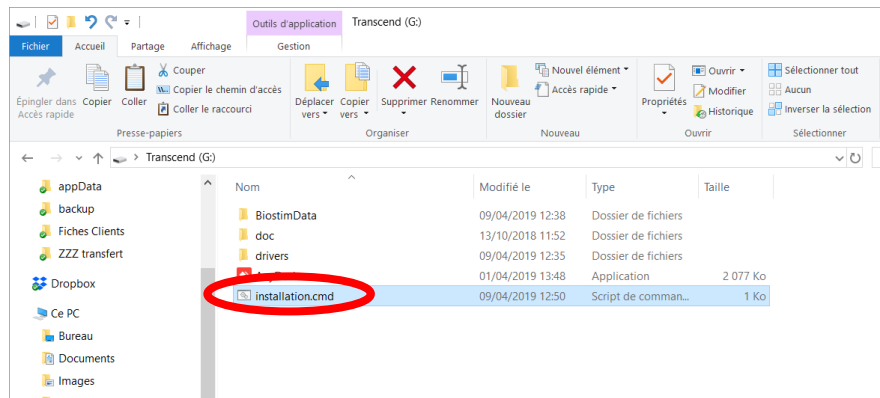

Esta operación crea una carpeta BiostimData en el directorio de usuario (que contendrá todos los datos de los pacientes), así como un acceso directo en el escritorio.

El procedimiento de instalación para un Mac es específico. Puede consultarse en el sitio web mazetsante.fr, en la página de asistencia.

4 Inicio

Coloque el interruptor ON/OFF de la parte posterior del aparato en la posición ON "1".

Compruebe que el indicador luminoso verde de alimentación de la parte frontal del aparato está encendido.

Ejecute el programa Biostim en el PC



5 Comprobación de la conexión

Compruebe que se ha establecido la conexión: botón de inicio verde.

El botón Home **rojo** indica un problema de comunicación entre el PC y el aparato. En este caso, compruebe los siguientes puntos:

- El módulo se enciende y el LED verde del panel frontal se ilumina.
- El cable USB está correctamente conectado al dispositivo y al PC.
- Controlador FTDI instalado correctamente (CDM212xxx_Setup.exe)




El botón de inicio **naranja** indica un problema con la bombilla de parada de emergencia:


- Compruebe que la bombilla de parada de emergencia está conectada
- Si se ha activado la parada de emergencia, debe reiniciarse el bioestimulador (interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior del aparato).

6 En caso de problema

Vaya a la pestaña Soporte de la página Configuración y siga los consejos que aparecen en rojo.

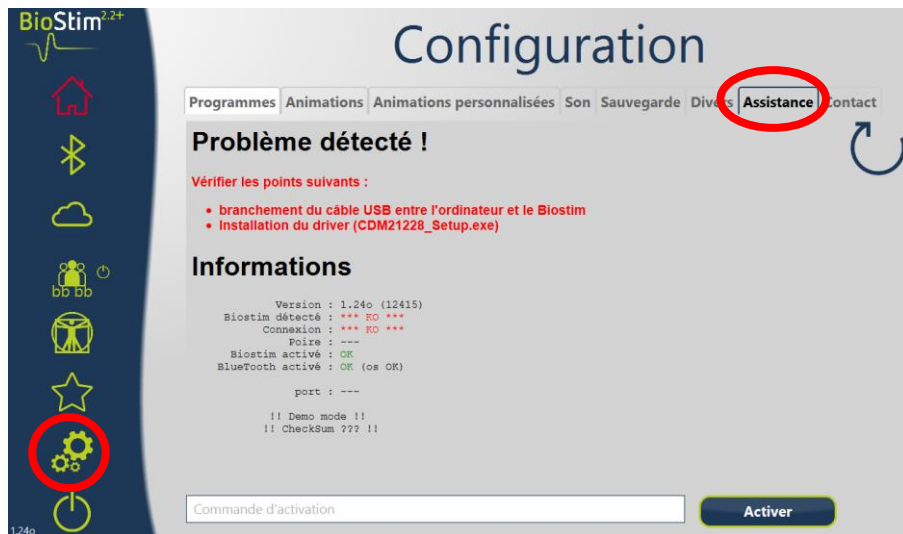

Si eso no es suficiente, vaya a la pestaña Contacto, donde puede notificar problemas o hacer sugerencias por correo electrónico.

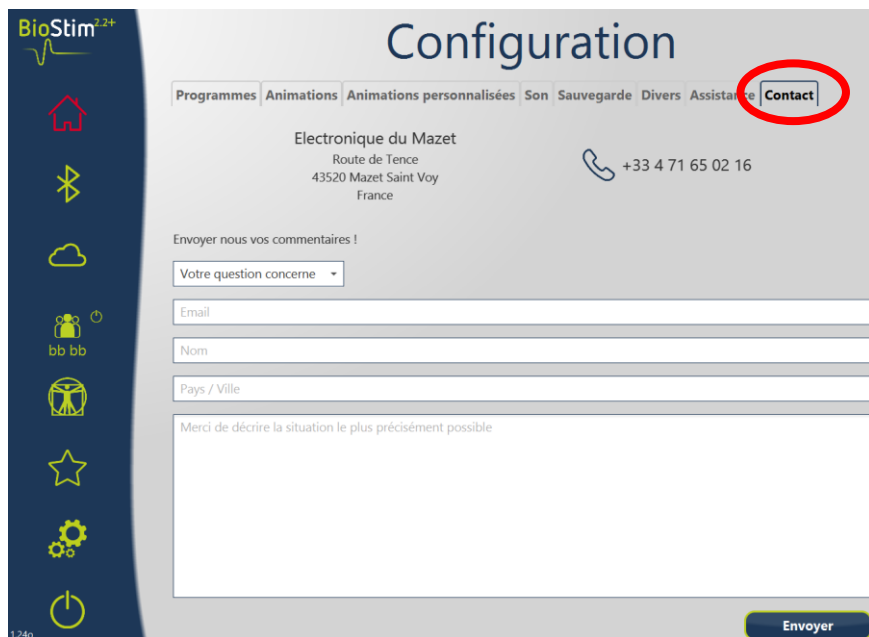

7 Mando a distancia

Durante la instalación, se instaló el software AnyDesk en el PC. Permite tomar el control remoto del PC para gestionar un servicio postventa.

Hay un acceso directo disponible en el escritorio



AnyDesk.exe

Para autorizar a un técnico a tomar el control, debes darle el nombre de usuario y la contraseña que aparecen en la ventana tras iniciar el software.

