

# *Manuel d'installation rapide*

## **1 Configuration Minimale**

L'appareil se connecte à un ordinateur ayant au moins les caractéristiques suivantes :

- Windows 8, 10 ou 11, ou MacOS
- Intel Core i3
- 4 Go RAM
- Résolution conseillée : au moins 1366\*768
- Pour l'utilisation d'un accessoire Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy ou Perifit), il est nécessaire de disposer d'un PC sous **Windows 10 ou 11** équipé d'une carte BlueTooth, ou MacOS

## **2 Logiciels nécessaires**


Les logiciels suivants doivent être installés sur l'ordinateur :

- Java 8 version 64 bits ( <https://www.java.com/fr/download/> )
- FTDI Driver (installation par CDM212xxx\_Setup.exe livré avec le logiciel)
- Foxit PDF Reader

Si ils ne sont pas déjà présents sur l'ordinateur, les fichiers d'installation sont disponibles sur la clé dans le répertoire « drivers ».

### 3 Installation

Installer le programme sur le bureau en double cliquant sur l'utilitaire **installation** (ou **installation.cmd**) à la racine de la clé.

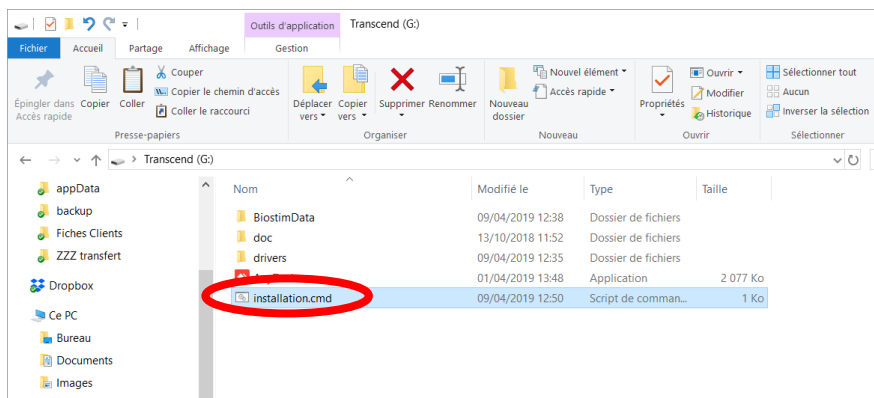


Cette opération crée un répertoire BiostimData dans le répertoire utilisateur (qui contiendra toutes les données patient), ainsi qu'un raccourci sur le bureau.

La procédure d'installation pour un Mac est spécifique. On peut la retrouver sur le site mazetsante.fr, dans la page assistance

### 4 Démarrage

Mettre l'interrupteur marche-arrêt situé à l'arrière de l'appareil sur ON « 1 ». Vérifier que l'indicateur lumineux vert de marche s'allume sur la face avant de l'appareil.


Lancer l'exécution du programme Biostim sur le  PC

### 5 Vérification de la connexion

Vérifier que la connexion est établie : bouton accueil de couleur verte.

Le bouton accueil de couleur **rouge** indique un problème de communication entre le PC et l'appareil. Dans ce cas, vérifier les points suivants :

- Le module est sous tension, le voyant vert en face avant est allumé.
- Le cordon USB est bien connecté sur l'appareil et sur le PC.
- Le driver FTDI est correctement installé (CDM212xxx\_Setup.exe )

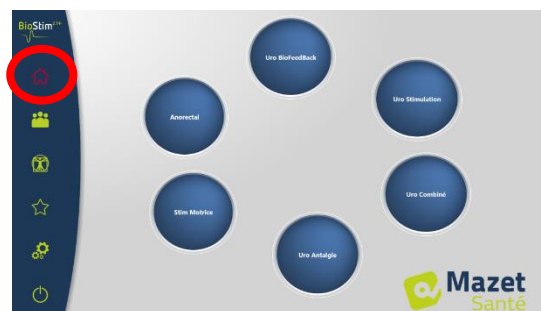


Le bouton accueil de couleur **orange** indique un problème avec la poire d'arrêt d'urgence :


- Vérifier que la poire d'arrêt d'urgence est branchée
- Si l'arrêt d'urgence a été activé, il faut redémarrer le biostim (interrupteur marche / arrêt à l'arrière de l'appareil)

## 6 En cas de problème

Aller dans l'onglet Assistance de la page de Configuration, et suivre les conseils indiqués en rouge.

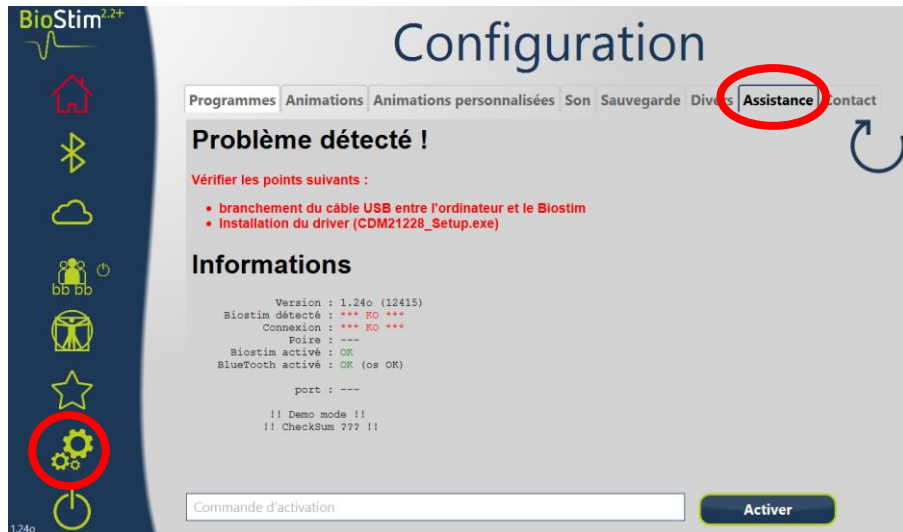

Si cela ne suffit pas, aller dans l'onglet Contact, qui permet de remonter des problèmes ou faire des suggestions par mail.

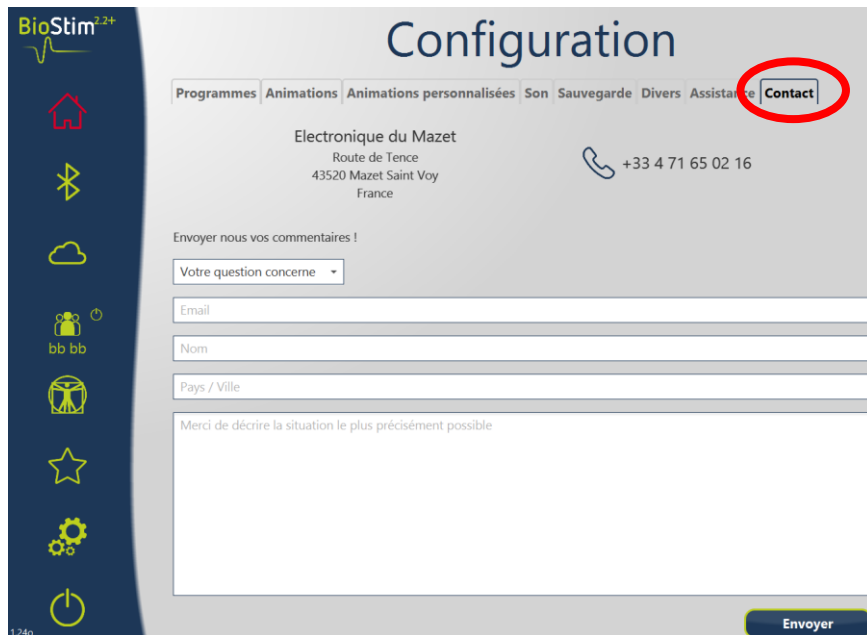

## 7 Prise en main à distance

Lors de l'installation, le logiciel AnyDesk a été installé sur le PC. Il permet de prendre le contrôle à distance du PC pour gérer un SAV.

Un raccourci est disponible sur le bureau



Afin d'autoriser un technicien à prendre le contrôle, il faut lui indiquer l'identifiant et le mot de passe qui s'affichent dans la fenêtre après le lancement du logiciel.

