

# *Avvio rapido*

## **1 Configurazione minima**

Il dispositivo si collega a un computer con almeno le seguenti caratteristiche:

- Windows 8, 10 o 11, o MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB DI RAM
- Risoluzione consigliata: almeno 1366\*768
- Per utilizzare un accessorio Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy o Perifit), è necessario un PC con **Windows 10 o 11** dotato di una scheda BlueTooth, oppure MacOS

## **2 Requisiti del software**


Sul computer deve essere installato il seguente software:

- Java 8 versione a 64 bit ( <https://www.java.com/fr/download/> )
- Driver FTDI (installazione tramite CDM212xxx\_Setup.exe fornito con il software)
- Foxit PDF Reader

Se non sono già presenti sul computer, i file di installazione sono disponibili sulla chiave nella directory "drivers".

### 3 Installazione

Installare il programma sul desktop facendo doppio clic sull'utilità di **installazione** (o **installation.cmd**) alla radice della chiave.

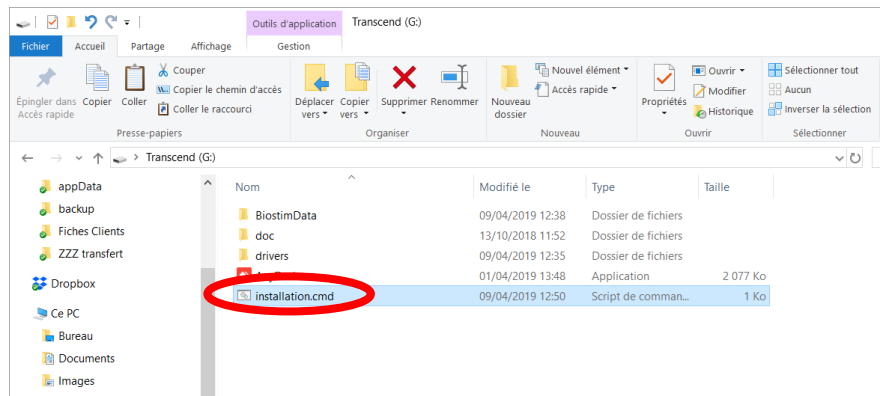

Questa operazione crea una cartella BiostimData nella directory utente (che conterrà tutti i dati dei pazienti) e un collegamento sul desktop.

La procedura di installazione per un Mac è specifica. È possibile trovarla sul sito web mazetsante.fr, nella pagina di supporto.

### 4 Inizio

Posizionare l'interruttore ON/OFF sul retro dell'unità su ON "1".

Verificare che la spia verde di alimentazione sulla parte anteriore dell'unità sia accesa.

Eseguire il programma Biostim sul PC



### 5 Controllo della connessione

Verificare che la connessione sia stabilita: tasto verde Home.

Il pulsante Home **rosso** indica un problema di comunicazione tra il PC e il dispositivo. In questo caso, verificare i seguenti punti:

- Il modulo è alimentato e il LED verde sul pannello frontale è acceso.
- Il cavo USB è collegato correttamente sia al dispositivo che al PC.
- Driver FTDI installato correttamente (CDM212xxx\_Setup.exe )




Il pulsante Home **arancione** indica un problema con la lampadina dell'arresto di emergenza:


- Controllare che la lampadina dell'arresto di emergenza sia collegata
- Se è stato attivato l'arresto di emergenza, il biostimolatore deve essere riavviato (interruttore on/off sul retro dell'unità).

## 6 In caso di problemi

Accedere alla scheda Supporto nella pagina di configurazione e seguire i consigli indicati in rosso.

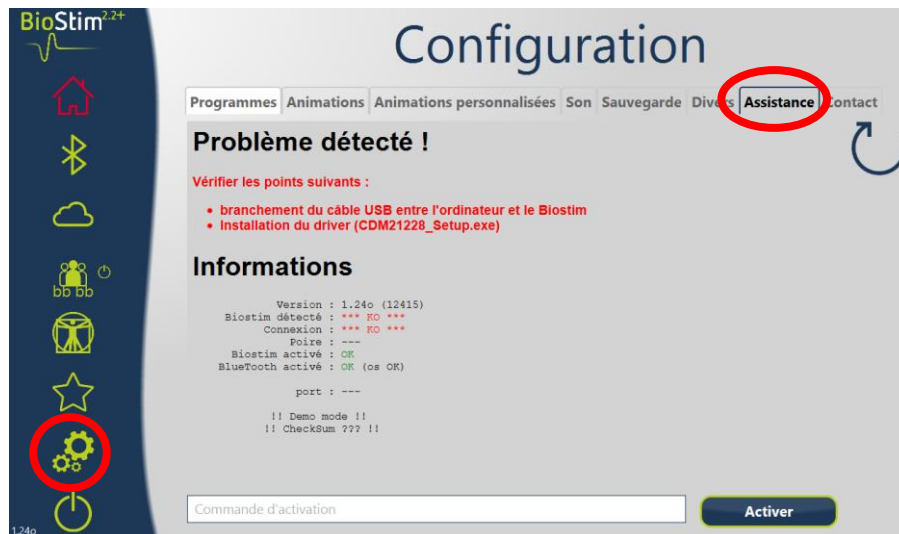

Se ciò non bastasse, è possibile accedere alla scheda Contatti, dove è possibile segnalare problemi o formulare suggerimenti via e-mail.

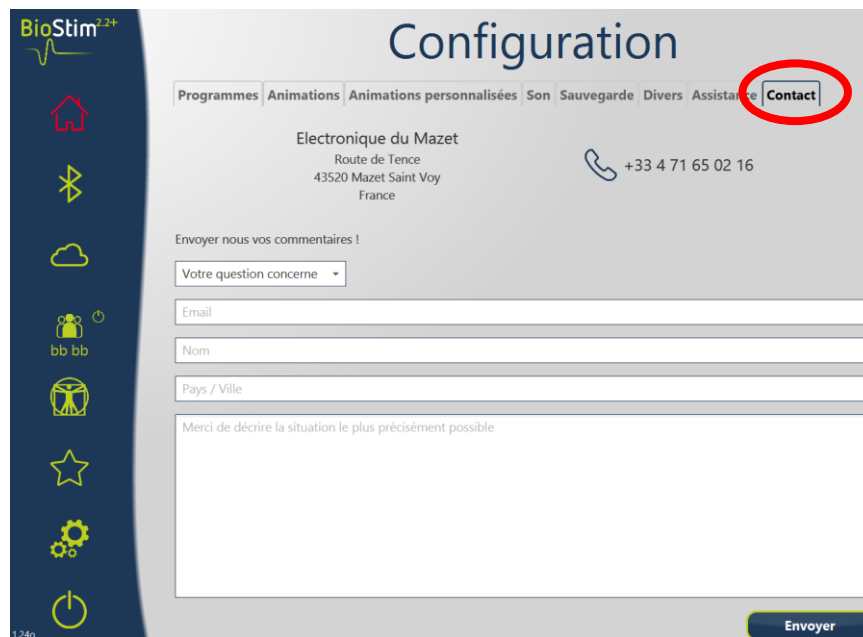

## 7 Telecomando

Durante l'installazione, il software AnyDesk è stato installato sul PC. Esso consente di assumere il controllo remoto del PC per gestire un servizio di assistenza post-vendita.

Sul desktop è disponibile un collegamento



Per autorizzare un tecnico a prendere il controllo, è necessario fornirgli il login e la password che appaiono nella finestra dopo l'avvio del software.

