

# *Início rápido*

## **1 Configuração mínima**

O dispositivo liga-se a um computador com, pelo menos, as seguintes características:

- Windows 8, 10 ou 11, ou MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB DE RAM
- Resolução recomendada: pelo menos 1366\*768
- Para utilizar um acessório Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy ou Perifit), é necessário um PC com **Windows 10 ou 11** equipado com uma placa BlueTooth, ou MacOS

## **2 Requisitos de software**


O seguinte software deve ser instalado no seu computador:

- Java 8 versão de 64 bits ( <https://www.java.com/fr/download/> )
- Driver FTDI (instalação através do CDM212xxx\_Setup.exe fornecido com o software)
- Leitor de PDF da Foxit

Se ainda não estiverem presentes no computador, os ficheiros de instalação estão disponíveis na chave, no diretório "drivers".

### 3 Instalação

Instale o programa no ambiente de trabalho fazendo duplo clique no utilitário **de instalação** (ou **installation.cmd**) na raiz da chave.

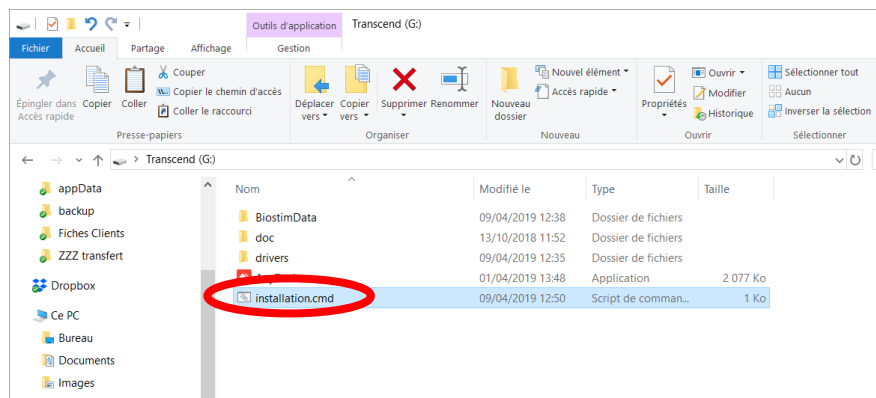

Esta operação cria uma pasta BiostimData no diretório do utilizador (que conterá todos os dados do doente), bem como um atalho no ambiente de trabalho.

O procedimento de instalação para um Mac é específico. Ele pode ser encontrado no site mazetsante.fr, na página de suporte.

### 4 Início

Colocar o interruptor ON/OFF na parte de trás da unidade em ON "1".

Verifique se a luz verde indicadora de alimentação na parte da frente da unidade está acesa.

Executar o programa Biostim no PC



### 5 Controlo da ligação

Verificar se a ligação está estabelecida: botão verde de início.

O botão Home **vermelho** indica um problema de comunicação entre o PC e o dispositivo. Neste caso, verifique os seguintes pontos:

- O módulo está ligado e o LED verde no painel frontal está aceso.
- O cabo USB está corretamente ligado ao dispositivo e ao PC.
- Driver FTDI corretamente instalado (CDM212xxx\_Setup.exe)




O botão de início **laranja** indica um problema com a lâmpada de paragem de emergência:


- Verificar se a lâmpada de paragem de emergência está ligada
- Se a paragem de emergência tiver sido activada, o bioestimulador tem de ser reiniciado (interruptor on/off na parte de trás da unidade).

## 6 Em caso de problema

Aceda ao separador Suporte na página Configuração e siga os conselhos apresentados a vermelho.

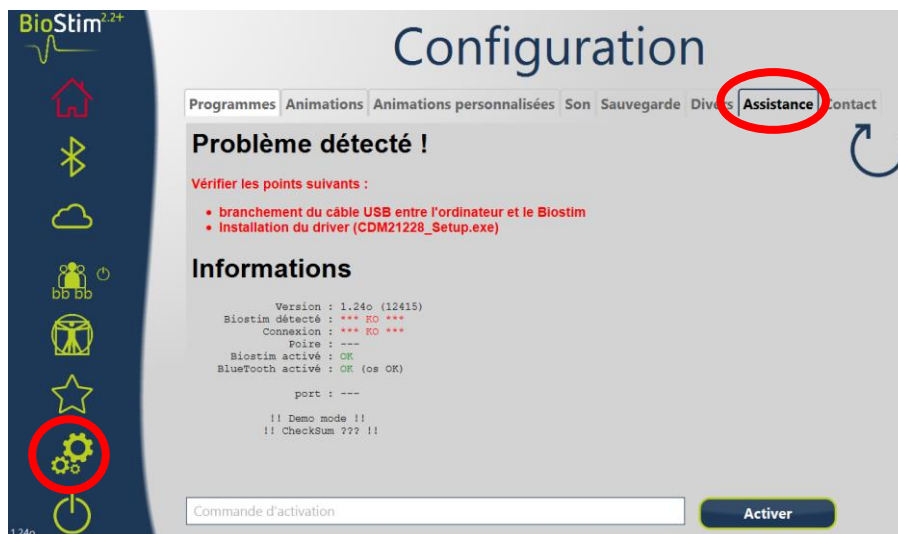

Se isso não for suficiente, vá ao separador Contacto, onde pode comunicar problemas ou fazer sugestões por correio eletrónico.

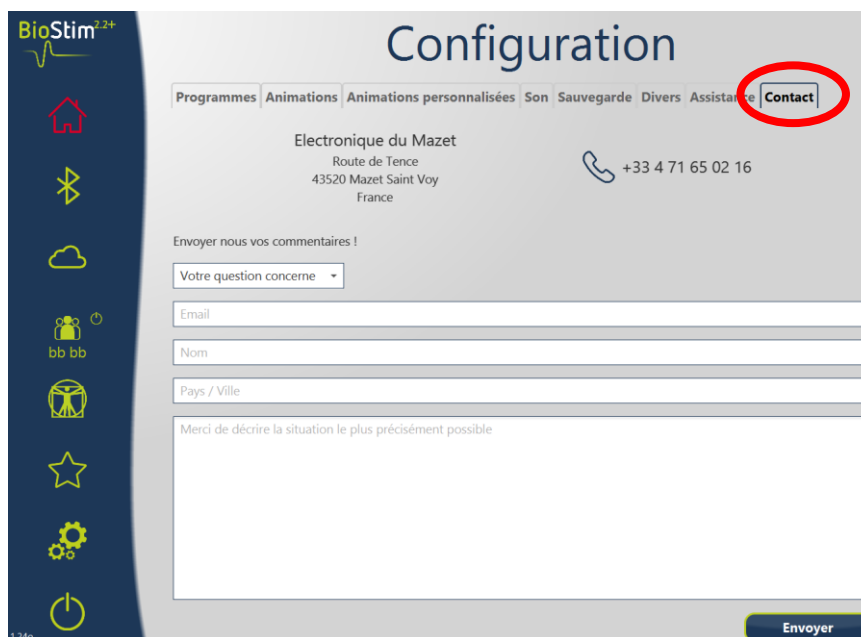

## 7 Controle remoto

Durante a instalação, o software AnyDesk foi instalado no PC. Permite-lhe assumir o controlo remoto do PC para gerir um serviço pós-venda.

Está disponível um atalho no ambiente de trabalho



Para autorizar um técnico a assumir o controlo, é necessário fornecer-lhe o login e a palavra-passe que aparecem na janela após o lançamento do software.

