

QuickStart

1 Configurație minimă

Dispozitivul se conectează la un computer cu cel puțin următoarele caracteristici:

- Windows 8, 10 sau 11, sau MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB RAM
- Rezoluție recomandată: cel puțin 1366*768
- Pentru a utiliza un accesoriu Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy sau Perifit), aveți nevoie de un PC cu **Windows 10 sau 11** echipat cu o cartelă BlueTooth, sau MacOS

2 Cerințe software


Următorul software trebuie să fie instalat pe computerul dvs:

- Java 8 versiunea pe 64 de biți (<https://www.java.com/fr/download/>)
- Driver FTDI (instalare prin CDM212xxx_Setup.exe furnizat cu software-ul)
- Foxit PDF Reader

Dacă acestea nu sunt deja prezente pe computer, fișierele de instalare sunt disponibile pe cheie în directorul "drivers".

3 Instalare

Instalați programul pe desktop făcând dublu clic pe utilitarul de **instalare** (sau **installation.cmd**) la rădăcina cheii.

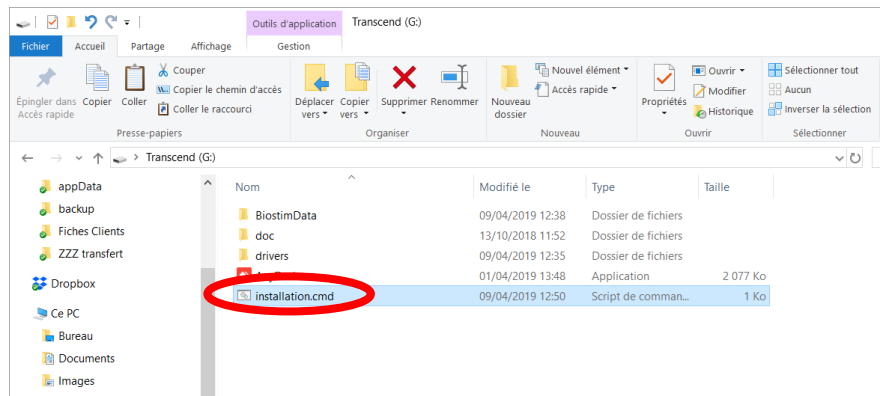

Această operațiune creează un dosar BiostimData în directorul utilizatorului (care va conține toate datele pacientului), precum și o comandă rapidă pe desktop.

Procedura de instalare pentru un Mac este specifică. Aceasta poate fi găsită pe site-ul mazetsante.fr, pe pagina de asistență.

4 Start

Setați comutatorul ON/OFF de pe partea din spate a unității pe ON "1".

Verificați dacă indicatorul verde de alimentare de pe partea frontală a unității este aprins.

Rulați programul Biostim pe PC



5 Verificarea conexiunii

Verificați dacă conexiunea este stabilă: butonul verde de pornire.

Butonul Acasă **roșu** indică o problemă de comunicare între PC și dispozitiv. În acest caz, verificați următoarele puncte:

- Modulul este alimentat, iar LED-ul verde de pe panoul frontal este aprins.
- Cablul USB este conectat corect atât la dispozitiv, cât și la PC.
- Driver FTDI instalat corect (CDM212xxx_Setup.exe)




Butonul **portocaliu** de pornire indică o problemă cu becul de oprire de urgență:


- Verificați dacă becul de oprire de urgență este conectat
- Dacă a fost activată oprirea de urgență, biostimulatorul trebuie repornit (comutatorul on/off din partea din spate a unității).

6 În caz de problemă

Accesați fila Asistență de pe pagina Configurare și urmați sfaturile afișate cu roșu.

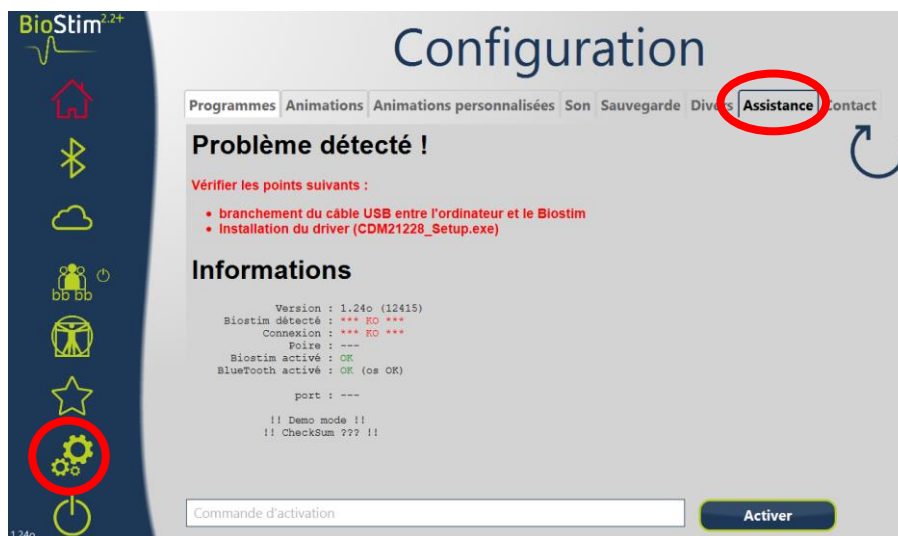

Dacă asta nu este suficient, accesați fila Contact, unde puteți raporta probleme sau face sugestii prin e-mail.

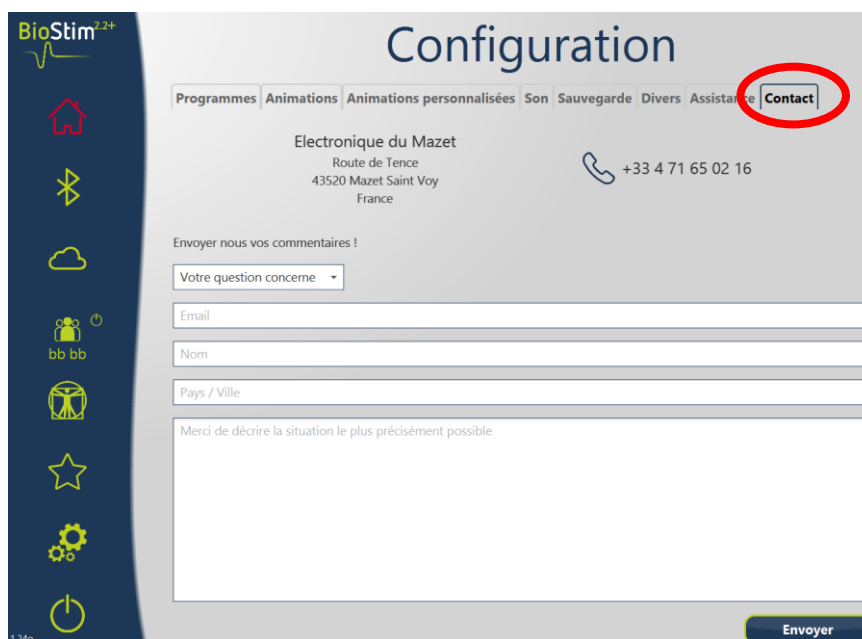

7 Telecomandă

În timpul instalării, software-ul AnyDesk a fost instalat pe PC. Acesta vă permite să preluați controlul de la distanță al PC-ului pentru a gestiona un serviciu post-vânzare.

O comandă rapidă este disponibilă pe desktop



AnyDesk.exe

Pentru a autoriza un tehnician să preia controlul, trebuie să îi furnizați datele de conectare și parola care apar în fereastră după lansarea software-ului.

