

# *Manual de instalare rapid*

## **1 Configurație minimă**

Dispozitivul se conectează la un computer cu cel puțin următoarele caracteristici:

- Windows 10 sau 11, sau MacOS Monterey (versiunea 12) sau ulterior
- Intel i3 pentru versiunile Windows
- Cip Intel i5 sau M1 pentru versiunile MacOS
- 8 GB RAM
- Rezoluție recomandată: cel puțin 1600\*900
- Pentru a utiliza un accesoriu Bluetooth (BioMoov, BlueBack, Emy sau Perifit), aveți nevoie de un PC cu **Windows 10 sau 11** echipat cu o cartelă BlueTooth, sau MacOS

**Vă rugăm să rețineți** că software-ul Biostim **nu funcționează** cu :

- Windows 10S sau 11S
- PC-uri cu un cip ARM
- Tablete sau smartphone-uri (Android sau iOS)
- Chromebook-uri

## **2 Software necesar**

Pe computer trebuie să fie instalat următorul software:


- Driver FTDI (instalare prin CDM212xxx\_Setup.exe furnizat cu software-ul)
- Foxit PDF Reader

Dacă acestea nu sunt deja prezente pe computer, fișierele de instalare sunt disponibile pe cheie în directorul "drivers".

## 3 Instalare

### 3.1 Ferestre

Instalați programul pe desktop făcând dublu clic pe utilitarul **de instalare** (sau **installation.cmd**) la rădăcina cheii.

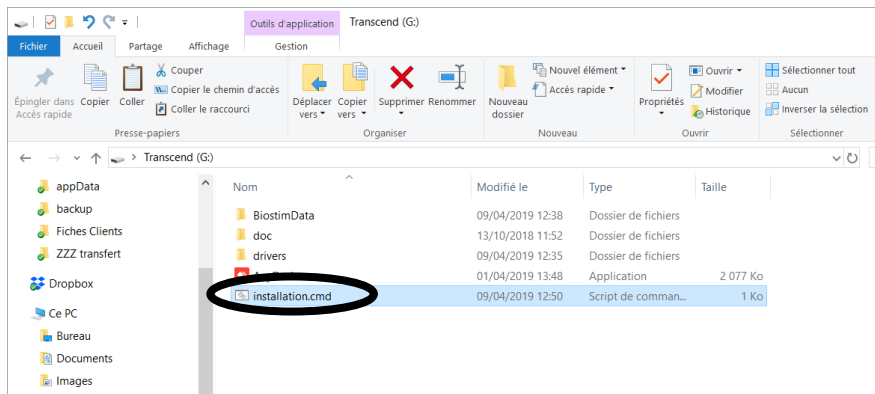

Această operațiune creează un director BiostimData în directorul utilizatorului (care va conține toate datele pacientului), precum și o comandă rapidă pe desktop.

### 3.2 Mac OS

Rulați programul Biostim\_Installer.pkg.

Această operațiune creează un director BiostimData în directorul utilizatorului (care va conține toate datele pacientului), precum și o comandă rapidă pe desktop.

## 4 Start

Rotiți comutatorul de pornire/oprire din spatele aparatului pe ON "1".


Verificați dacă indicatorul verde de alimentare de pe partea din față a aparatului este aprins.

Rulați programul Biostim pe computer



## 5 Verificarea conexiunii

Verificați dacă conexiunea este stabilă: butonul verde de pornire.

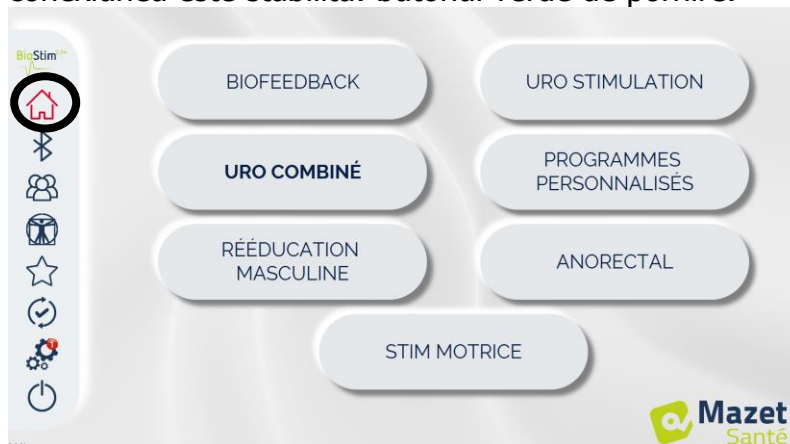

Butonul Acasă **roșu** indică o problemă de comunicare între computer și dispozitiv. În acest caz, verificați următoarele puncte:


- Modulul este alimentat, iar LED-ul verde de pe panoul frontal este aprins.
- Cablul USB este conectat corect la dispozitiv și la computer.
- Driverul FTDI este instalat corect (CDM212xxx\_Setup.exe )

Butonul **portocaliu** de pornire indică o problemă cu becul de oprire de urgență:


- Verificați dacă comutatorul de oprire de urgență este conectat
- Dacă a fost activată oprirea de urgență, BioStim trebuie repornit (comutatorul on/off de pe partea din spate a dispozitivului).

## 6 În cazul unei probleme

Mergeți la fila Autotest. Dacă este detectată o problemă, aceasta va fi indicată cu roșu. Dacă nu există conexiune la internet, logo-ul autotest va fi roșu.

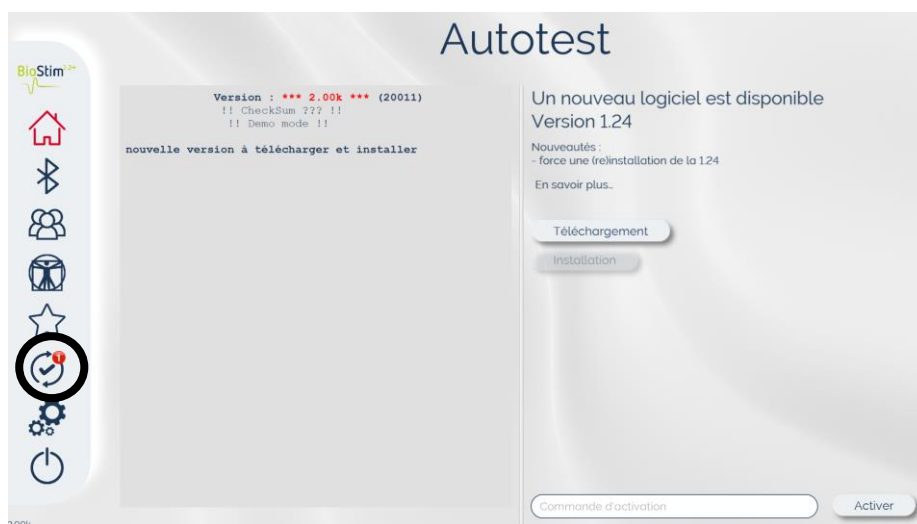

Dacă nu este suficient, accesați fila Contact de pe pagina de configurare, unde puteți raporta probleme sau face sugestii prin e-mail.

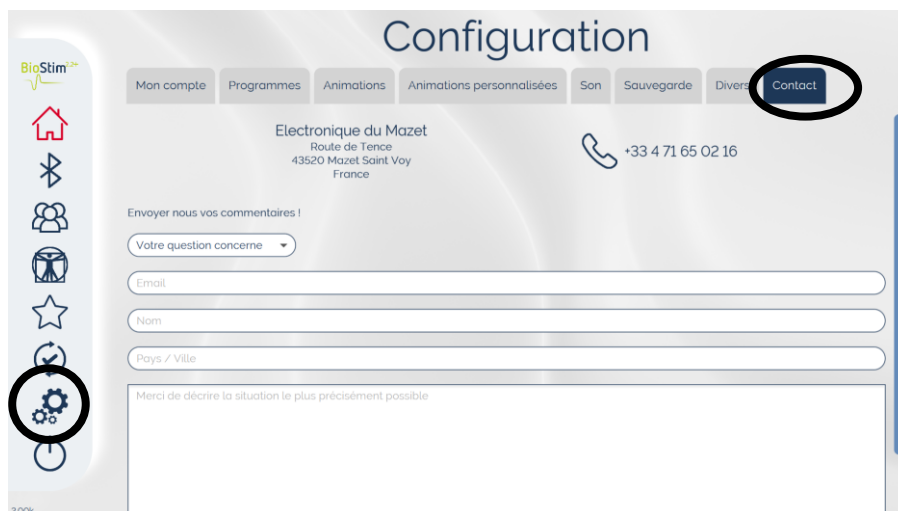

## 7 Telecomandă

În timpul instalării, software-ul AnyDesk a fost instalat pe PC. Acesta permite controlul de la distanță al PC-ului pentru a gestiona un serviciu post-vânzare.

O comandă rapidă este disponibilă pe



Pentru a autoriza un tehnician să preia controlul, trebuie să îi furnizați numele de utilizator și parola care apar în fereastră după lansarea software-ului.

