

Instrukcja instalacji szybki

1 Minimalna konfiguracja

Urządzenie łączy się z komputerem o co najmniej następujących parametrach:

- Windows 10 lub 11 albo MacOS Monterey (wersja 12) lub nowsza
- Intel i3 dla wersji Windows
- Procesor Intel i5 lub M1 dla wersji MacOS
- 8 GB RAM
- Zalecana rozdzielczość: co najmniej 1600*900
- Aby korzystać z akcesoriów Bluetooth (BioMoov, BlueBack, Emy lub Perifit), potrzebny jest komputer z systemem **Windows 10 lub 11** wyposażony w kartę BlueTooth lub MacOS

Należy pamiętać, że oprogramowanie Biostim **nie działa** z plikami :

- Windows 10S lub 11S
- Komputery PC z układem ARM
- Tablety lub smartfony (Android lub iOS)
- Chromebooki

2 Wymagane oprogramowanie

Na komputerze musi być zainstalowane następujące oprogramowanie:


- Sterownik FTDI (instalacja poprzez CDM212xxx_Setup.exe dostarczony z oprogramowaniem)
- Foxit PDF Reader

Jeśli nie ma ich jeszcze na komputerze, pliki instalacyjne są dostępne na kluczu w katalogu "drivers".

3 Instalacja

3.1 Windows

Zainstaluj program na pulpicie, klikając dwukrotnie narzędzie **instalacyjny** (lub **installation.cmd**) w katalogu głównym klucza.

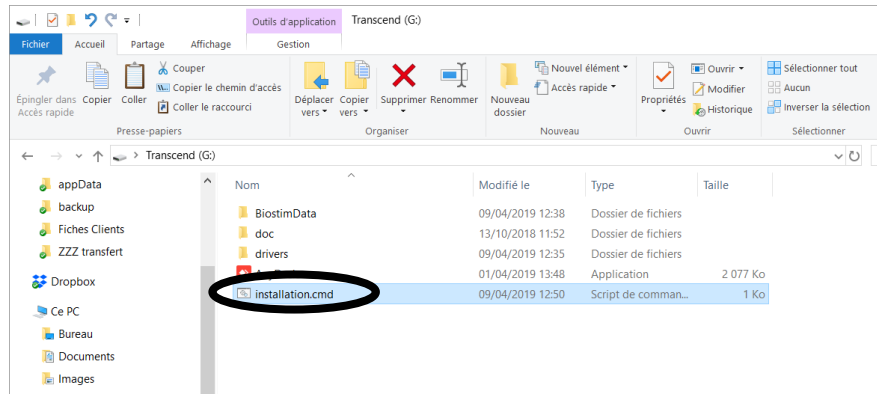

Ta opération crée le catalogue BiostimData dans le catalogue utilisateur (qui contiendra toutes les données du patient), et également un raccourci sur le bureau.

3.2 Mac OS

Lancez le programme Biostim_Installer.pkg.

Ta opération crée le catalogue BiostimData dans le catalogue utilisateur (qui contiendra toutes les données du patient), et également un raccourci sur le bureau.

4 Start

Réglez l'interrupteur/commutateur à l'arrière de l'appareil en position ON "1".

Vérifiez que la lumière verte d'alimentation à l'avant de l'appareil s'allume.

Lancez le programme Biostim sur votre ordinateur



5 Vérification de la connexion

Vérifiez que la connexion a été établie : bouton vert Home.



Czerwony przycisk Home oznacza problem z komunikacją między komputerem a urządzeniem. W takim przypadku należy sprawdzić następujące punkty:

- Moduł jest włączony i świeci się zielona dioda LED na panelu przednim.
- Kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.
- Sterownik FTDI jest poprawnie zainstalowany (CDM212xxx_Setup.exe).

Pomarańczowy przycisk Home wskazuje na problem z żarówką wyłącznika awaryjnego:


- Sprawdź, czy wyłącznik awaryjny jest podłączony
- Jeśli wyłącznik awaryjny został aktywowany, BioStim musi zostać ponownie uruchomiony (włącznik/wyłącznik z tyłu urządzenia).

6 W przypadku wystąpienia problemu

Przejdź do zakładki Autotest. Jeśli zostanie wykryty problem, będzie on oznaczony kolorem czerwonym. Jeśli nie ma połączenia z Internetem, logo autotestu będzie czerwone.



Jeśli to nie wystarczy, przejdź do zakładki Kontakt na stronie konfiguracji, gdzie możesz zgłosić problemy lub sugestie przez e-mail.

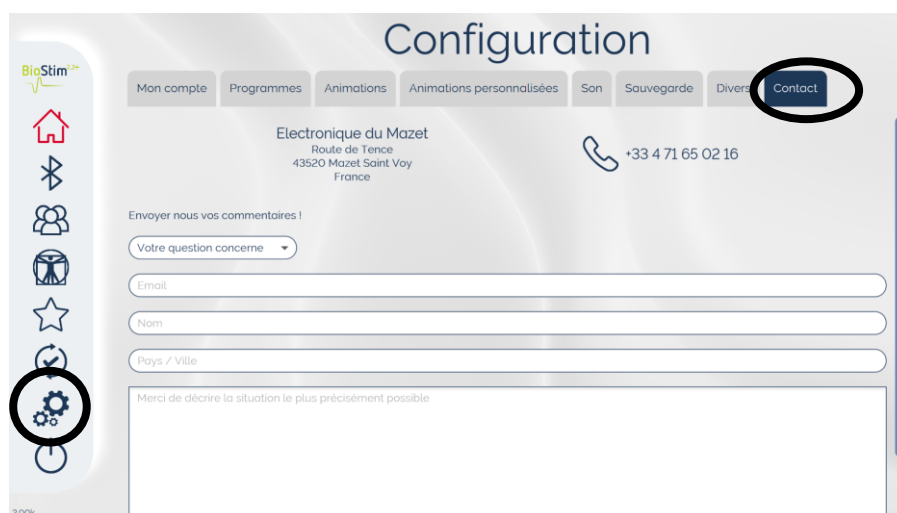

7 Pilot zdalnego sterowania

Podczas instalacji na komputerze zainstalowano oprogramowanie AnyDesk. Umożliwia ono zdalne sterowanie komputerem w celu zarządzania serwisem posprzedażowym.

Skrót jest dostępny na



Aby upoważnić technika do przejęcia kontroli, należy podać mu nazwę użytkownika i hasło, które pojawiają się w oknie po uruchomieniu oprogramowania.

