

Installationshandbok snabb

1 Minsta konfiguration

Enheten ansluts till en dator med minst följande egenskaper:

- Windows 10 eller 11, eller MacOS Monterey (version 12) eller senare
- Intel i3 för Windows-versioner
- Intel i5 eller M1-chip för MacOS-versioner
- 8 GB RAM-MINNE
- Rekommenderad upplösning: minst 1600*900
- För att använda ett Bluetooth-tillbehör (BioMoov, BlueBack, Emy eller Perifit) behöver du en dator som kör **Windows 10 eller 11 och som är** utrustad med ett BlueTooth-kort, eller MacOS

Observera att Biostim-programvaran **inte fungerar** med :

- Windows 10S eller 11S
- Datorer med ARM-chip
- Surfplattor eller smartphones (Android eller iOS)
- Kromebook-datorer

2 Programvara krävs

Följande programvara måste vara installerad på datorn:


- FTDI-drivrutin (installation via CDM212xxx_Setup.exe som medföljer programvaran)
- Foxit PDF-läsare

Om de inte redan finns på datorn finns installationsfilerna tillgängliga på nyckeln i katalogen "drivers".

3 Installation

3.1 Fönster

Installera programmet på skrivbordet genom att dubbelklicka på **installationsverktyget** (eller **installation.cmd**) i roten av nyckeln.

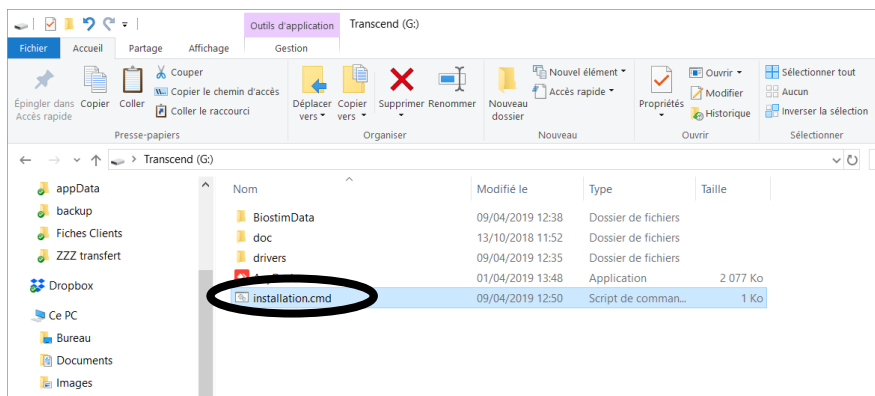

Denna åtgärd skapar en BiostimData-katalog i användarkatalogen (som kommer att innehålla alla patientdata), samt en genväg på skrivbordet.

3.2 Mac OS

Kör programmet Biostim_Installer.pkg.

Denna åtgärd skapar en BiostimData-katalog i användarkatalogen (som kommer att innehålla alla patientdata), samt en genväg på skrivbordet.

4 Start

Vrid på/av-knappen på apparatens baksida till ON "1".


Kontrollera att den gröna strömindikatorlampan på apparatens framsida är tänd.

Kör Biostim-programmet på din dator



5 Kontroll av anslutningen

Kontrollera att anslutningen är upprättad: grön hemknapp.

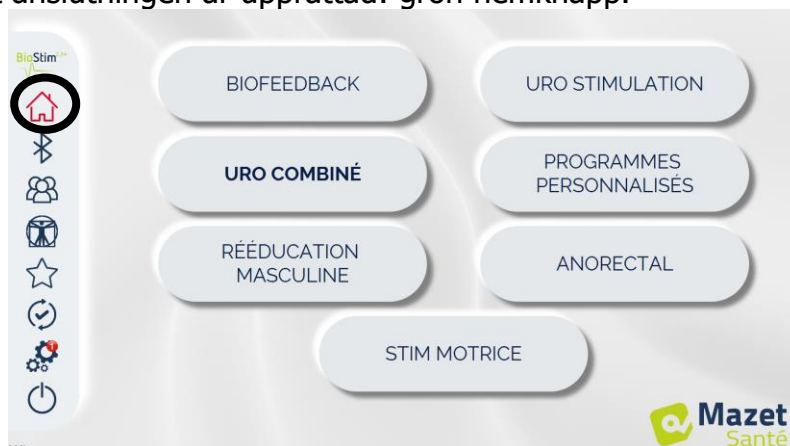

Den **röda** hemknappen indikerar ett kommunikationsproblem mellan datorn och enheten. I så fall ska du kontrollera följande punkter:


- Modulen är spänningssatt och den gröna LED-lampan på frontpanelen lyser.
- USB-kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.
- FTDI-drivrutinen är korrekt installerad (CDM212xxx_Setup.exe)

Den **orange**färgade hemknappen indikerar ett problem med nödstoppslampan:


- Kontrollera att nödstoppslampan är ansluten
- Om nödstoppet har aktiverats måste BioStim startas om (på/av-knappen på apparatens baksida).

6 I händelse av problem

Gå till fliken Autotest. Om ett problem upptäcks visas det i rött. Om det inte finns någon internetanslutning kommer autotestlogotypen att vara röd.

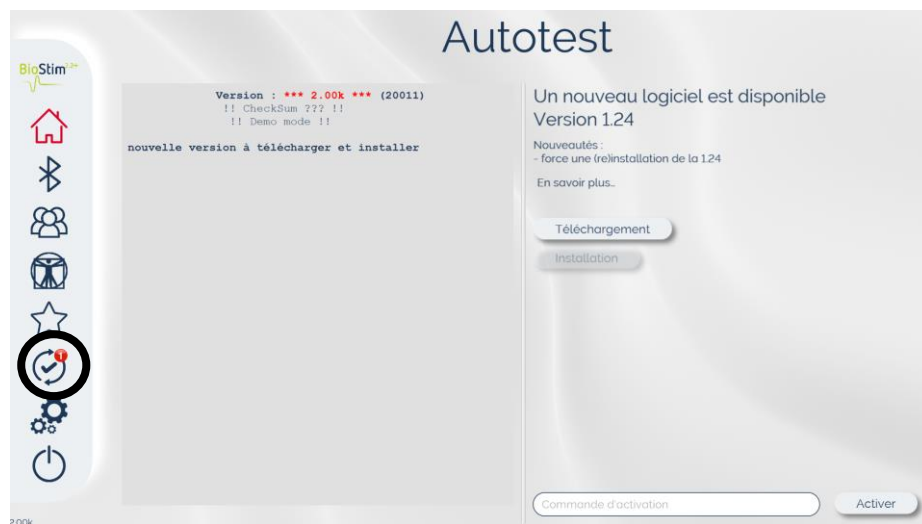

Om det inte är tillräckligt kan du gå till fliken Kontakt på konfigurationssidan, där du kan rapportera problem eller lämna förslag via e-post.

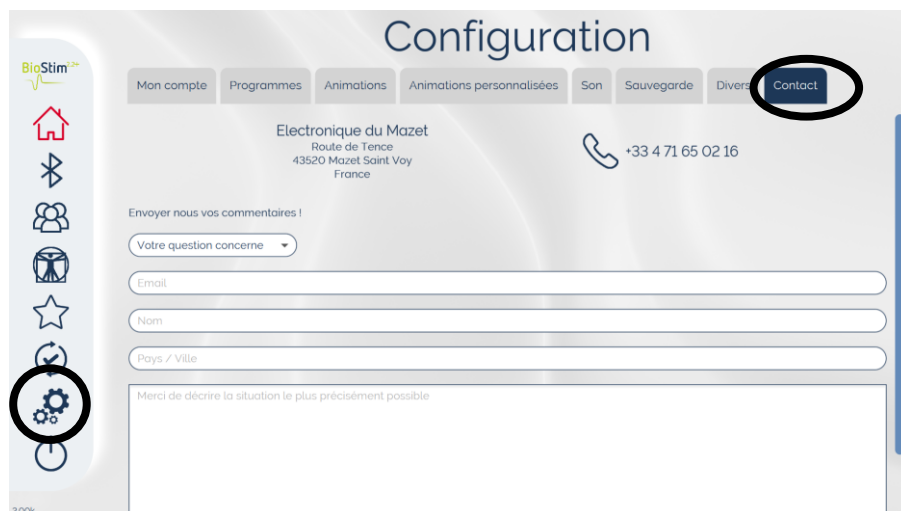

7 Fjärrkontroll

Under installationen installerades programvaran AnyDesk på datorn. Den möjliggör fjärrstyrning av datorn för att hantera en eftermarknadsservice.

En genväg finns tillgänglig på



För att en tekniker ska kunna ta över kontrollen måste du ge honom det användarnamn och lösenord som visas i fönstret när programvaran startas.

